



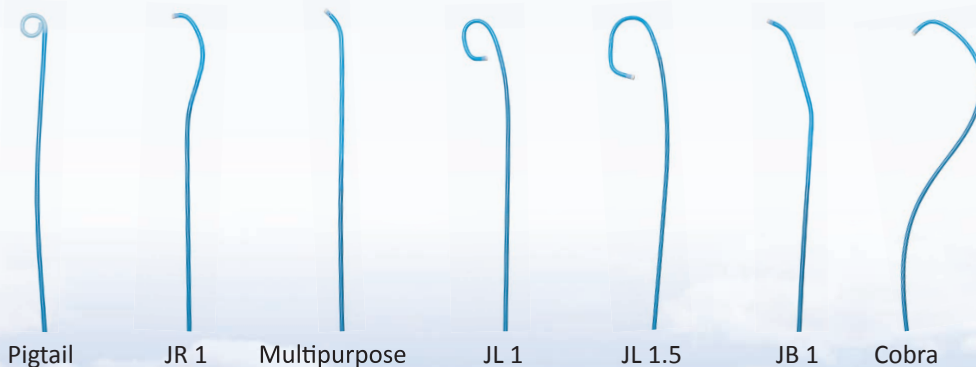

Mongoose[®]

Unik angiografikateter
för barn lanseras nu i Sverige

50 pediatrika kardiologer, ett non-profit och ett tillverkande företag samlades 2010, för att kartlägga bristen på pediatrika produkter. Tillsammans utvecklade de bl a en serie 3 French angiografikatetrar, introducers och ledare, specifika för barn. Dessa är de första och enda katetrarna som godkännts av FDA för pediatrikt bruk och de enda som CE-märkts för pediatrikt bruk. Hittills har läkare behandlat över 10 000 barn med PediaVasculars produkter. Idag används de på 95% av alla amerikanska pediatrika angiolab.

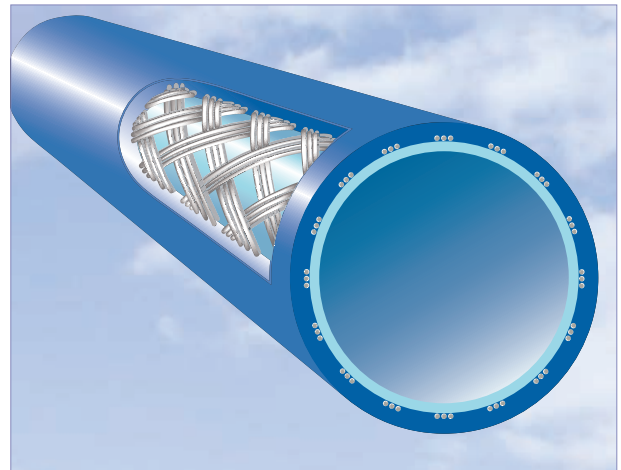

 PediaVascular

Mongoose®

Angiografikatetrar för barn



Kateterspetsen är speciellt dimensionerad, formad och mjukgjord för pediatrikt bruk.

Sidohålen på pigtailkatetern är mycket närmare kateterspetsen än på standard 4 Fr-katetrar.

3 Fr-katetern är den enda nätförstärkta (braided) 3 Fr-katetern. Detta innebär en större lumen (.030") som ger ett mycket högt flöde, bra tryckmätning och bra knickningsmotstånd.





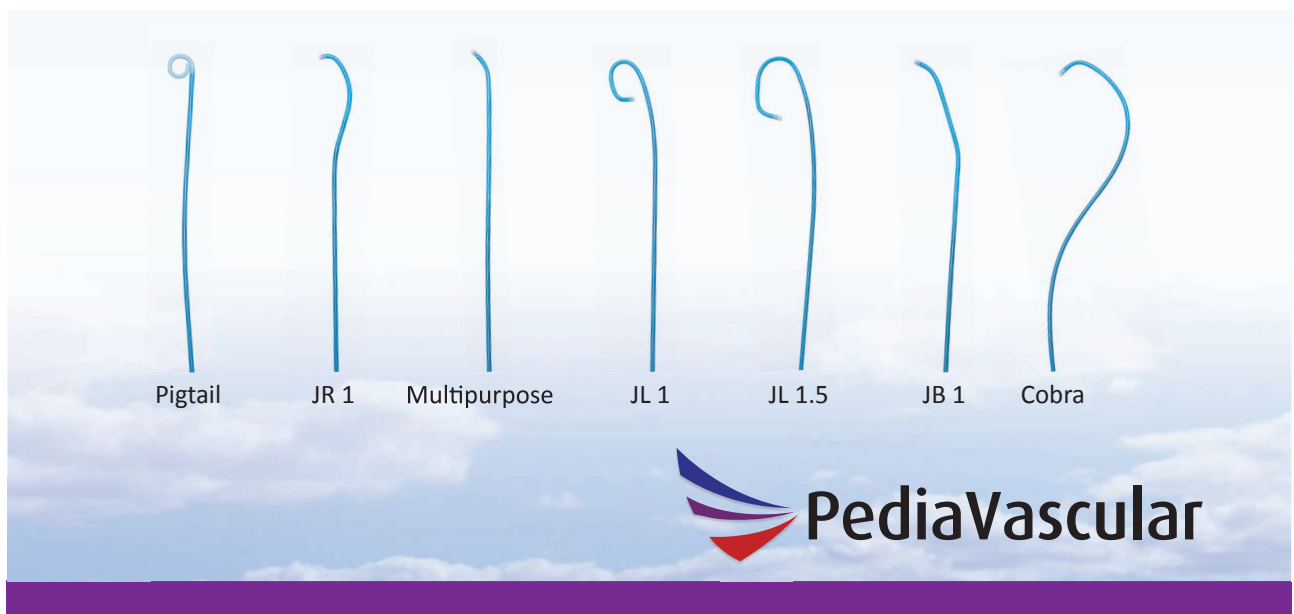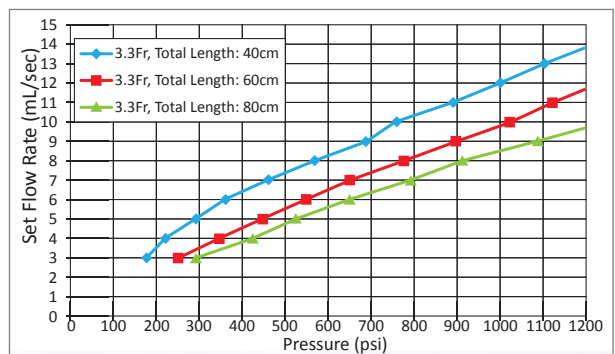


Introducern är speciellt formgiven för dessa katetrar. Innerdiametern passar för 3,3 Fr-katetern och den tunna väggen gör att ytterdiametern är densamma som på andra 3 Fr-introducers.

En av de största fördelarna med introducern är övergången mellan skidan och dilatatorn, den är knappt märkbar.



Mongoose®

Angiografikatetrar för barn

Artikelnummer	Storlek	Spets	Längd ledare	Storlek ledare	Max flöde	Förp.	
A-3PIG-40/1001	3.3Fr	Pigtail (6mm), sidohål	40cm	.030"	13ml/s	5/fp	
A-3PIG-60/1002	3.3Fr	Pigtail (6mm), sidohål	60cm	.030"	11ml/s	5/fp	
A-3PIG-80/1003	3.3Fr	Pigtail (6mm), sidohål	80cm	.030"	9ml/s	5/fp	
A-4PIG-60/1004	4.0Fr	Pigtail (7mm), sidohål	60cm	.035"	22ml/s	5/fp	
A-4PIG-80/1005	4.0Fr	Pigtail (7mm), sidohål	80cm	.035"	19ml/s	5/fp	
A-3JB1-60/1008	3.3Fr	JB1, sidohål	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3JB1-80/1009	3.3Fr	JB1, sidohål	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4JB1-60/1010	4.0Fr	JB1	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4JB1-80/1011	4.0Fr	JB1	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	
A-3JB1-60/1044	3.3Fr	JB1	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3JB1-80/1045	3.3Fr	JB1	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-3JR2-60/0046	3.3Fr	JB1	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3JR2-80/0047	3.3Fr	JB1	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4JR2-60/0048	4.0Fr	JB1	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4JR2-80/0049	4.0Fr	JB1	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	
A-3JR1-60/1014	3.3Fr	JR1	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3JR1-80/1015	3.3Fr	JR1	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4JR1-60/1016	4.0Fr	JR1	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4JR1-80/1017	4.0Fr	JR1	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	
A-3JL1-60/1020	3.3Fr	JL1	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3JL1-80/1021	3.3Fr	JL1	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4JL1-60/1022	4.0Fr	JL1	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4JL1-80/1023	4.0Fr	JL1	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	
A-3JLA-60/1026	3.3Fr	JLA	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3JLA-80/1027	3.3Fr	JLA	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4JLA-60/1028	4.0Fr	JLA	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4JLA-80/1029	4.0Fr	JLA	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	
A-3MP-60/1032	3.3Fr	MP, sidohål	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3MP-80/1033	3.3Fr	MP, sidohål	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4MP-60/1034	4.0Fr	MP, sidohål	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4MP-80/1035	4.0Fr	MP, sidohål	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	
A-3COB-60/1038	3.3Fr	Cobra	60cm	.030"	11ml/s	3/fp	
A-3COB-80/1039	3.3Fr	Cobra	80cm	.030"	9ml/s	3/fp	
A-4COB-60/1040	4.0Fr	Cobra	60cm	.038"	22ml/s	3/fp	
A-4COB-80/1041	4.0Fr	Cobra	80cm	.038"	19ml/s	3/fp	

Super Sheath[®]

Introducer för barn



Artikelnummer	Storlek	Längd	Storlek ledare	Ledare med/utan	Förp.
S-3N5/1005	3.3Fr	5 cm	0.018"	utan ledare	5/fp
S-3N7/1006	3.3Fr	7 cm	0.018"	utan ledare	5/fp
S-3W5/1007	3.3Fr	5 cm	0.018"	med ledare	5/fp
S-3W7/1008	3.3Fr	7 cm	0.018"	med ledare	5/fp

Ledare

Artikelnummer	Storlek	Längd	Spets	Förp.
SW30-140	.030" ledare	140cm	2 cm floppy tip	5/fp
SW30-140J	.030" ledare	140cm	2 cm floppy tip, 5cm J-tip	5/fp